

LifeWindow ONE™

Monitor fisiológico multiparamétrico veterinário

*EXCLUSIVO PARA VETERINÁRIOS





Medidas veterinárias de padrão ouro

- 🐾 Oximetria Masimo® SET Rainbow com PVI®
- 🐾 Capnografia com agentes anestésicos opcionais
- 🐾 Pressão sanguínea Suntech® VetBP
- 🐾 Até 8 horas de bateria
- 🐾 Temperatura

 **DIGICARE**
ANIMAL HEALTH
Tecnologia que traduz confiança

O Life Window One da Digicare é um monitor fisiológico portátil, com módulos exclusivos para uso veterinário. Com interface touch screen e design compacto - pesa apenas 1,3 kg - o Life Window One pode ser facilmente montado em um stand móvel ou IV pole. Perfeita combinação de tamanho e funcionalidade para atender a qualquer ambiente de hospital ou clínica. O app para Ipad permite total controle do monitor, mostra 3 formas de onda, padrões tabulares de 96 horas e grava e imprime ondas ECG e dados de pacientes.

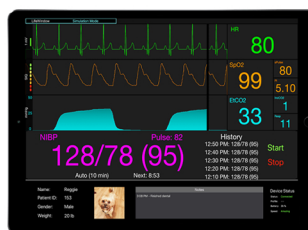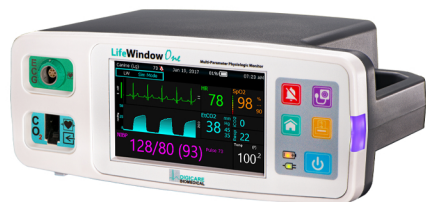









APP LW One para Ipad

- 3 formas de onda
- Impressão de até 2 h de ECG
- 96 padrões de horas
- Conexão wi-fi
- Controle de todas as configurações no LW One

Nossos modelos mais populares estão abaixo. Para uma lista completa visite nosso site.

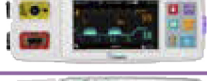Tudo Incluso
Triplo (Inclui todos os acessórios)
Duplo (Inclui acessórios para dois parâmetros)
Individual (Inclui acessórios para um único parâmetro)

Código	Foto	Medidas	Módulos	Descrição
LW 11		NIBP PnP #1 PnP #2	Suntech Conector PnP para SpO2 Conector PnP para CO2	NIBP somente com conexões para CO2 e SpO2
LW 21		SpO2 NIBP PnP	Suntech Masimo SpO2 interno Conector PnP para CO2	Masimo SpO2, Suntech NIBP e conexões para CO2
LW 23		CO2 SPO2	Respironics(sidestream interno) Masimo SpO2 Interno	Respironics sidestream CO2 e Masimo SpO2
LW 26		SpO2 Multi-gás	Masimo SpO2 Interno Masimo Gás(sidestream interno AX+)	Masimo SpO2 e detecção de gás mainstream
LW 27		SpO2 Multi-gás	Masimo SpO2 interno Masimo Gás(mainstream interno AX+)	Masimo SpO2 e detecção de gás mainstream
LW 31		ECG SpO2 NIBP	Digicare Vet ECG Masimo SpO2 interno Suntech	ECG, Masimo SpO2 e Suntech NIBP
LW 33		NIBP SpO2 CO2	Suntech Respironics(sidestream interno) Masimo SpO2 módulo externo	Suntech NIBP Respironics sidestream interno CO2 Masimo SpO2 (Plug and Play)
LW 43		ECG NIBP SpO2 CO2	Suntech Digicare Vet ECG Respironics sidestream interno Masimo SpO2 módulo externo	Digicare Vet ECG Suntech NIBP Respironics sidestream interno CO2 Masimo SpO2

* Notas *

1. A temperatura está incluída em todos os modelos e os acessórios são vendidos separadamente.
2. PnP módulos - O monitor é capaz de medir o parâmetro. Acessório é vendido separadamente.
3. PnP SpO2 ou CO2 - O monitor é pré-configurado para os dois, não é necessário tomar essa decisão na hora da compra.
4. Masimo SpO2 internal - O módulo de SpO2 é instalado dentro do monitor, esse é um módulo Rainbow e pode aceitar PVI + outros parâmetros Rainbow.
5. Masimo SpO2 external - O SpO2 é instalado fora do monitor, esse módulo não pode ter PVI ou qualquer parâmetro Rainbow.
6. Outras opções de módulo de medida estão disponíveis sob consulta, verificar com a Digicare a disponibilidade.